


Care Connect Set-up

1. If you are not already connected to the Care Connect EMR application, you may download the desktop application via this link:


<https://services-acc.careconnect.be/client/6.2-gp/>

Download this zip file and extract all from it. Ensure that the extracted folder is called careconnect and is sitting on your Desktop.


2. Once you have logged in you will come to your home page.

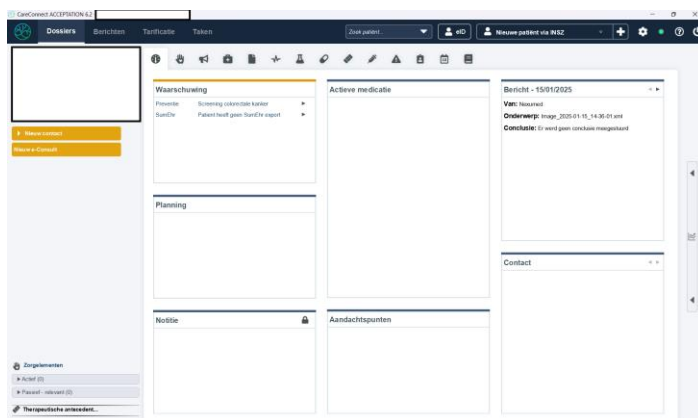

3. Click the settings icon in the top right corner.

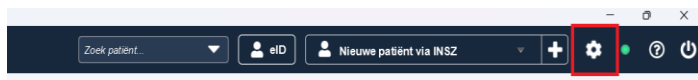

4. You will see a drop down menu. Look for the titles Berichten and Interfaces.

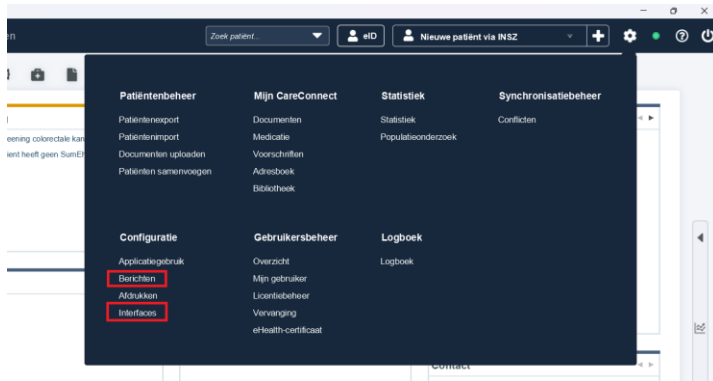

5. First click Berichten and you will see this displayed on the page but Mexi interface will be a lighter colour. Click it as seen in the photo at which time the font will become bold.



6. 1. click the first(1)input field and copy and paste this:

C:\Nexumed\inFromDevice\output-to-emr

2. click the second (2) input field and copy and paste the same thing

C:\Nexumed\inFromDevice\output-to-emr

3. The third (3) red square will then be a bold colour and click that to save this address's

Now Berichten will be properly configured. Next, we must configure the Interfaces.

7. Click the setting wheel/icon again to get the menu dropdown. This time click the Interface from the dropdown. You come across this on the screen.

☐ CM42y updaten via vCM42
☐ vCM42 met lokale registratie **Inschrijven**

☐ Lade aanraking via web applicatie +
☐ Lade aanraking via in bestand met het programma +

☐ Toelafconformiteit en email doorgeven aan labo's die de conformiteitslijst bijhouden
 U moet dit per pakket overleggen. U kan dit voor afzonderlijke pakketten uitschakelen door in het dossier een venging te registreren voor "contactformulier (mail, tel) doorsturen naar externe interfaas".

☐ Koppelen met een extern agenda systeem
☐ Exporteer MSD bestanden naar

☐ Exporteer bestanden naar Intego, inschrijvingsdatum
 Indien u vragen hebt over Intego, zie <https://www.intego.be>
 Indien u vragen hebt over uw contract, contacteer Intego via intego@kuleuven.be

☒ Gebruik unidirectionele toestelkoppeling +

Click the checkbox Gebruik unidirectionele toestelkoppeling as since in the red box above.

8. 1. click the dropdown arrow (1)

2. click the ECG label (2)

☒ Gebruik unidirectionele toestelkoppeling +

Cardioflex
ECG F12
 SDS104
 SpiroConnect
 Winspiro Pro

9. This pop up will then be displayed on the screen

Toestelkoppeling:

Pad naar het programma

Pad naar de import folder

Software argumenten

1. Click the first (1) input field and copy and paste:


C: path to your Desktop => C:\Nexumed\emrReciever\dummy.exe

2. Click the second (2) input field and copy and paste:

C:\Nexumed\nexumedIn\

3. Last click the third red box (3) and click OK

10. The pop up will disappear and you will see this and click the red box to save the interface configuration.

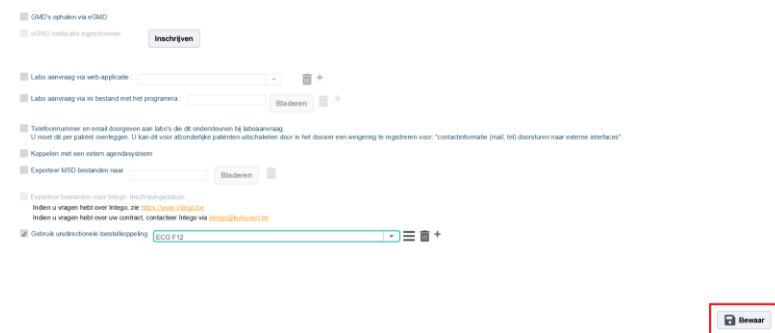

☐ GMD's ophalen via eGMD
☐ eGMD notifiëren ingeschreven **Inschrijven**

☐ Labo aanroep via web-applicatie

☐ Labo aanroep via xs bestand met het programma

☐ Telefoonnummer en email doorgeven aan labo's die de onderzoeken bij labo-aanroep
U moet dit per patiënt overnemen. U kunt dit voor afzonderlijke patiënten uitschakelen door in het dossier een veldje te registreren voor "contactinformatie (mail, tel) doorsturen naar externe interface"

☐ Koppelen met een extern agenda-systeem

☐ Exporteer MSD bestanden naar

☐ Exporteer bestanden voor Intego, Inscriptiegedatum:
Indien u vragen hebt over Intego, zie <https://www.intego.be>
Indien u vragen hebt over een contact, contacteer Intego via info@intego.be

☒ Druk de ondersteunde beschikking

Opslaan

This will take you to the end of the configuration of your Care Connect desktop application with Nexcore software by Nexumed.

Enjoy

The Nexumed Team

www.nexumed.eu